



检测报告

TEST REPORT

委托方	东莞市友爱医疗用	品有限公司
生产单位	4-1	XA'T
样品名称	一次性防护口罩	
型号规格	711	47
检测类别	委托检测	





广东产品质量监督检验研究院

No. FZ2003443

广东产品质量监督检验研究院 GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

检测报告



TEST REPORT



报告随机号: LNI3580

第1页 共7页

样品名称	一次性防护口罩	样品编号	YFZ20/003443	
2	送样 (√) 抽样 (/)		I.	
商标	. 7.4	型号规格	<i>5</i> / 2 .	
委托方	东莞市友爱医疗用品有限公司	检测类别	委托检测	
委托方地址	广东省东莞市黄江镇清龙路 149 号之一	产品编号/批号	17-	
生产单位	/ : :	抽样单编号	10000	
受检单位	ं क्यां संस	生产日期		
抽样单位	or the last of the	样品数量	45(个)	
抽样地点		抽样基数	1 <u>22.4744</u>	
抽样日期	-7/	检验地点	本部实验室	
收样日期	2020年03月06日	检验日期	2020年03月06日~ 2020年03月10日	
检测依据	GB/T 32610-2016 《日常防护型口罩技术规	范》	THE	
判定依据	- 1 			
检测结论	本次委托检测共检 12 项,所检项目符合标准的要求。 检验检测专用章) 签发日關於例,专用章)			
备注	报告中的""表示此项不适用,报告中"/"表示此项空白。 (Q1)			

批准:

車核 云っ 主位: 光明い



第2页 共7页

序	检测项目[单位]	标准	检验检验证明章	检测结果	单项	备
号 1	外观要求	条款 5.2	口罩表面不应有破损、油 污斑渍、变形及其他明显 的缺陷	符合	结论 合格	注 /
2	耐摩擦色牢度[级]	5. 3	≥4	干擦: 4-5	合格	/
3	吸气阻力[Pa]	5. 3	≤175	75.7 未预处理 63.9 75.3 预处理 70.1	- 合格	1
4	呼气阻力[Pa]	5. 3	≤145	61.3 未预处理 90.4 71.1 预处理 75.1	- 合格	/
5	口罩带及口罩带与口罩 体的连接处断裂强力 [N]	5. 3	≥20	23. 5 22. 1 21. 2 20. 5	_ 合格 _	/
6	コ罩下方视野	5, 3	≥60°	63°	合枠	1
7	防护效果[%]	5. 5	D级 ≥65	66. 9	合格	1

THE THE

检测报告 TEST REPORT

第3页 共7页

				33		
序号	检测项目[单位]	标准 条款	检验检测表		单项 结论	备注
8	标识	8. 2	每装应验证显应清辨标标包列也元检格明位有可的,应下容中使法生用贮如下户,应下容中使法生用贮如	村料(内层、符合 甘滤层) 甘编号 符合 中效果级别 符合 K(小号、符合	合格	7
9	甲醛含量 [mg/kg]	5. 3	≤20 (方法检出限: 20mg)	未检	出 合格	1
10	pH 值	5. 3	4.0~8.5 (0.1mo1/L KC1 溶液	6. 5	合格	1
11	可分解致癌 芳香胺染料[mg/kg]	5. 3	禁用 (方法检出限: 5mg/l	未检 (见附表		1
12	环氧乙烷残留量[µg/g]	5. 3	≤10 (方法检出限: 0.5 μ	g /g)	出 合格	1



检测报告 TEST REPORT

第4页 共7页

附表 1	检验检测专用章		
检测项目: 可分解致癌芳香胺染料	(Q1)		
测试方法: GB/T 17592-2011	·		
可分解致癌芳香胺名称	化学文摘编号	检出限	检测结果
1) 4-氨基联苯	92-67-1	5mg/kg	未检出
2) 联苯胺	92-87-5	5mg/kg	未检出
3) 4 氯 邻甲苯胺	95-69-2	5mg/kg	未检出
4) 2-萘胺	91-59-8	5mg/kg	未检出
5) 邻氨基偶氮甲苯	97 56 3	5mg/kg	未检出
6) 5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	5mg/kg	未检出
7) 对氯苯胺	106-47-8	5mg/kg	未检出
8) 2,4-二氨基苯甲醚	6_5-05-4	5mg/kg	未检出
9) 4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	5mg/kg	未检出
10) 3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	5mg/kg	未检出
11) 3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	5mg/kg	未检出
12) 3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	5mg/kg	未检出
13) 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	5mg/kg	未检出
14) 2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	5mg/kg	未检出
15) 4,4′亚甲基 二 (2 氯苯胺)	101-14-4	5mg/kg	未检出
16) 4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	5mg/kg	未检出
17) 4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	5mg/kg	未俭出
18) 邻甲苯胺	95-53-4	5mg/kg	未检出
19) 2,4氨基甲苯	95-80-7	5mg/kg	未检出
20) 2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	5mg/kg	未检出
21) 邻氨基苯甲醚	90-04-0	5mg/kg	未检出
22) 4-氨基偶氮苯	60-09-3	bmg/kg	未检出
23) 2,4-二甲基苯胺	95-68-1	5mg/kg	未检出
24) 2,6-二甲基苯胺	87-62-7	5mg/kg	未检出



第 5 页 共 7 页





50pcs



NON-MEDICAL





How to Use

- 1. Open the mask, with the white side facing in and nose clip on the top.
- 2. Pull the ear straps behind your ears and adjust them to make you feel comfortable. 3. Use your hands to adjust the shape of the nose clip until it is pressed to fit the bridge of your nose.
- Adjust the size of the mask by pulling the top and bottom until you cover your nose and mouth.

Instruction: Cover on the nose and mouth

- Precautions:

 Before using the product, check whether the packaging is in good condition, confirm the production date of the packaging indication, and use within the validity period;

 This product is non-sterilized. If the package is damaged, please discontinue use; (If it is necessary to enter the sterile room or other environment, please enter after sterilization. Ethylene oxide is recommended for sterilization;

 This product is disposable and cannot be re-used. Please use as soon as possible after it is unsealed.

 The maximum wearing time should not exceed 4 hours;

 Please avoid direct contact with the inside of the mask during use;

 After use, the product should be disposed according to the provisions of the hospital or the environmental protection department;

 Please read the instruction carefully before use;

Caution: This product is not

Product Storage Conditions and Methods: This product should be stored in the room with relative humidity of less than 80%, good ventilation, no corrosive gas, fire, moisture, anti-rodent and anti-insect equipment, and the storage period should be within the product validity period;


Valid Date: Storage under prescribed conditions, valid for two years, please use within the validity

See the packaging indication for production batch number and expiration date.
Valid Date: 2 Years





第6页 共7页

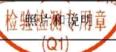

代十



Executive Standard: GB/T32610-2016

Specification: 175MM*95MM(+-5MM)

3 LAYERS ,50PCS/BOX(50PCS/BAG) LARGE SIZE

Product Structure and Main Purpose:

- The product of Earloop Mask is composed of the mask body, elastic band and nose clip.
- The mask body is composed of PP non-woven fabric, Melt-blown Fabric and PP non-woven fabric.

 The upper part of the mask is equipped with a nose clip made of flexible material.

Scope of Use:

it is suitable for the health care of the user in general environment or the open environment where there is no risk of body fluids and spillage this mask can not be use as a medical protective mask

MANUFACTURE: Dongguan Youai Medical Supplies Co., Ltd. FACTORY ADDRESS: 149-1 Qinglong Road, Huangjiang Town, Bongguan City, Guangdong Prevince, China

样品描述

型号规格或其它说明





第7页 共7页

1,	试验地点: 广州市黄埔区科学城科学大道 10 号
2.	委托单位地址及邮编: 广东省东莞市黄汇镇清龙路 149 号之一
3、	检测环境条件: 检测项目均在相应标准规定的条件下进行 (有注明的除外)
4,	抽样程序(如适用):
5、	偏离标准方法的说明(如适用):
6、	检测结果不确定度说明(如适用):
7,	分包项目及分包方(如适用):
	
	拉第